

第 1 章

中性子コリメータ

1.1 ビームサイズを制限する必要性

中性子ビームは可能な限り細いのが望ましい。例えば、半径 50 mm の幅を持っている中性子ビームを用いると、散乱点が y 軸方向に 100 mm の幅を持つ。grid の座標を $y = 0$ mm, plate の座標を $y = 140$ mm とし、ビームの中心が $y = 70$ mm の位置にあるとすると、中性子ビームは $y = 20$ –120 mm の範囲に入射する。この時 $y = 120$ mm の位置で散乱が起きると、見かけ上の有感領域は grid 方向に 120 mm, plate 方向に 20 mm となる。反対に、 $y = 20$ mm の位置で散乱が起きると、見かけ上の有感領域は grid 方向に 20 mm, plate 方向に 120 mm となる。しかし、MAIKo TPC は y 座標をトラックの周囲に発生した電子の読み出し面に到達する時間差を用いて検出しているため、 y 座標の絶対値を決定することができない。すると、 $y = 120$ mm と $y = 20$ mm のどちらで散乱が起きたのかを区別できない。どちらの場合でも確実に有感領域中で停止したと保証するためには、散乱点から y 軸方向に ± 20 mm を実質の有感領域としなければならない。

有感領域が小さいと領域外に出ていく α 粒子の数が増えてしまい、検出効率が低下する。そのため、中性子ビームの y 軸方向のサイズは可能な限り小さいのが望ましい。その反面、ビームを補足すると標的で生成された中性子を制限することになるので、中性子の入射量が低下する。この 2 つの効果を考慮して収量が大きくなるビームサイズを決定する。

1.2 シミュレーションによるビームサイズの決定

重照射室内のトリチウムターゲットから中性子は 4π に等方的に放出していると仮定する。すると、中性子の収量はコリメータの立体角で決定される。トリチウムターゲットから重照射室の大実験室側の壁までの距離は 1.46×10^3 mm, 壁の厚さは 1×10^3 mm である。コリメータの半径を r mm とすると、立体角は $\pi \times r^2 / (2.46 \times 10^3)^2$ となる。図??のエネルギー分布を仮定して、 α 粒子の検出効率を求めた。5–50 mm でのコリメータの立体角の割合と検出効率を表 1.1 に示す。検出効率は 10 mm 以下ではあまり変化がない。5 mm と 10 mm を比較すると、立体角は 4 倍 10 mm の方が大きい。大きな検出効率を持ちつつ立体角が大きい 10 mm のコリメータを用いる。

表 1.1: コリメータの半径とコリメータの立体角, 検出効率.

コリメータの半径 (mm)	立体角 (sr)	検出効率 (%)
5	1.30×10^{-5}	48.7
10	5.19×10^{-5}	48.2
20	2.08×10^{-4}	46.6
30	4.67×10^{-4}	39.2
40	8.31×10^{-4}	26.3
50	1.30×10^{-3}	10.3

1.3 コリメータの作成

中性子を遮蔽する材料として, 陽子を多く含むポリエチレンや吸収断面積が大きいホウ素が広く用いられている. ポリエチレンとホウ素入りポリエチレンでの中性子の遮蔽度合いを PHITS (ver. 3.14) [?] を用いて計算した. 図 1.1 は 14 MeV の中性子がコリメータを通過したときの位置分布である. 2 つの中性子の分布に大きな差異は見られない. 図 1.2, 1.3 はコリメータを通過した後の中性子のエネルギー分布である. 青色のヒストグラムは 0–10 mm の範囲の中性子, 赤色のヒストグラムは 10–55 mm の範囲の中性子のエネルギー分布である. コリメータの穴の部分に対してポリエチレンまたはホウ素入りポリエチレンの部分は中性子が遮蔽されることが分かる. ポリエチレンとホウ素入りポリエチレンでは同程度にコリメートできているので, 本実験ではコストの面からポリエチレンを用いたコリメータを作成した. 実際に作成したコリメータを図 1.4 に示す. このコリメータは半径 55 mm, 高さ 100 mm の円柱の中心に半径 10 mm の穴を開けた構造になっている. 壁の厚さが 1000 mm であるため, このコリメータ 10 個を中性子の取り出し穴に挿入する.

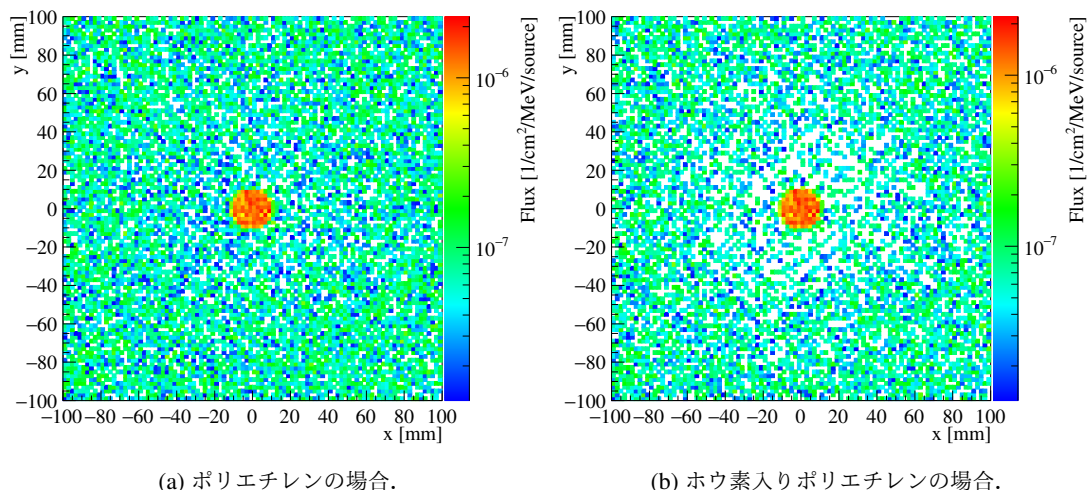


図 1.1: コリメータ通過後の中性子の位置分布.

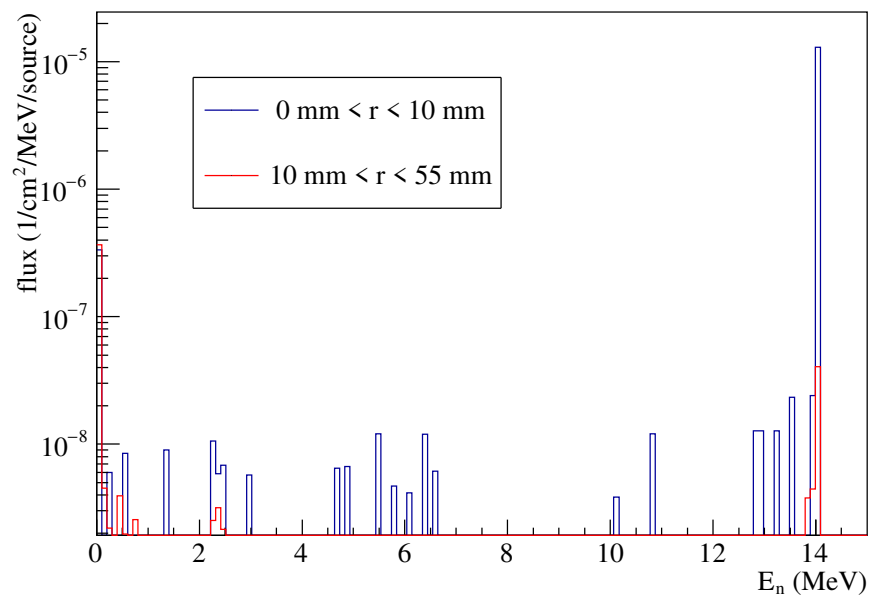


図 1.2: ポリエチレンコリメータの場合のエネルギー分布.

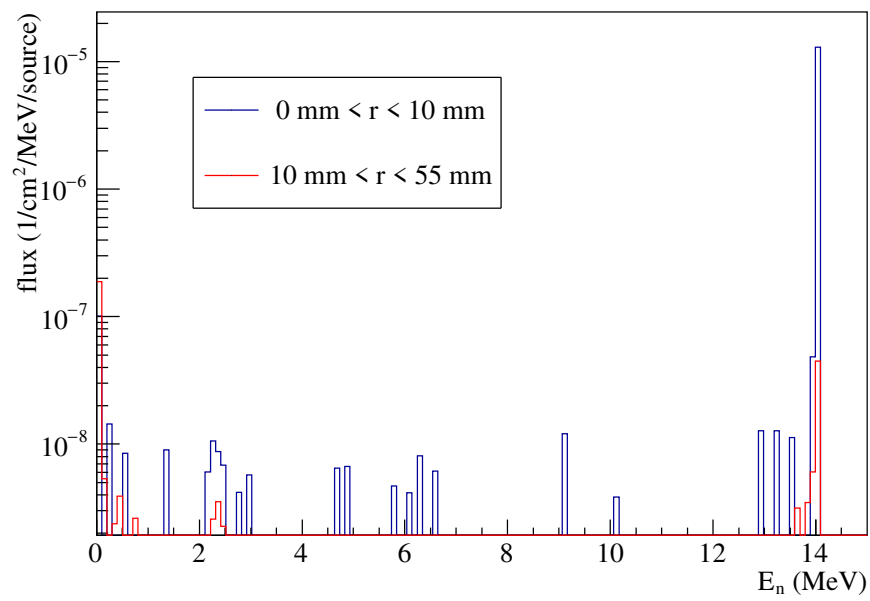


図 1.3: ホウ素入りポリエチレンコリメータの場合のエネルギー分布.



図 1.4: ポリエチレンで作成したコリメータ.

1.4 中性子の収量

PHITS による計算では 0–10 mm の範囲の 13.9–14.1 MeV の中性子は 4.07×10^{-5} /MeV/source となる. OKTAVIAN の DC ビームラインで生成される中性子が 5×10^9 /s であるとする, コリメータを通過してくる中性子の収量は 4.07×10^4 /s となる.